

Коллекция кресел пациента и врача ATMOS®
Для кабинета ЛОР-врача



Эффективный рабочий поток и дизайн Для оптимального позиционирования пациента



Наклон спинки кресла пациента модели E2 плавно регулируется примерно от 10° вперед до горизонтального положения.

Благодаря тому, что ножная секция и подлокотники движутся синхронно, кресло быстро раскладывается и становится длинной и стабильной кушетки.

Подголовники кресла E2 регулируются по высоте и могут, при необходимости, легко сниматься. Откидная поддержка для ног обеспечивает пациенту комфорт во время обследования.

Сиденье кресла модели E2 поворачивается отдельно от

основания на 90° вправо и влево.

Высота сиденья плавно регулируется при помощи электромотора в диапазоне от 54 до 74 см.

Однократное нажатие на педаль ножного выключателя возвращает кресло после обследования снова в его исходное положение.

Верхняя часть кресла поворачивается на 360° и может фиксироваться в любой позиции (у модели E2).

Более подробное описание смотрите на следующих страницах.

Модель кресла пациента	E 2	M 2
Составит комплект с:		
ATMOS® S 61 Servant	✓	✓
Сиденье		
Высота сиденья	от 54 до 74 см	от 53 до 73 см
Электромеханическое изменение высоты	✓	✓
Сиденье для детей	●	●
Поверхность сиденья поворачивается на 90° отдельно	✓	-
Максимальная нагрузка (кг)	150	150
Спинка кресла		
Изменение положения при помощи газовой пружины	✓	✓
Угол наклона	от -10° до 90°	от -10° до 90°
Коллапс-позиция (90°)	✓	✓
Ножная секция		
Изменения положения вручную	✓	✓
Синхронно со спинкой кресла	✓	-
Поддержка для ног откидная	✓	-
Подлокотники		
Синхронны со спинкой кресла	✓	-
Поднимаются вверх по одному	✓	✓
Нижняя часть кресла мобильна		
Вперёд/назад	●	●
Вправо/влево	●	●
Монтаж		
Фиксация к полу	◆	◆

◆ = в зависимости от требований законодательства страны нахождения

✓ = стандарт

● = опция

- = отсутствует

ATMOS® Chair 31 P и ATMOS® Chair 21 P



Подголовник

Устойчивый подголовник с простой регулировкой высоты

Спинка

Плавный наклон спинки кресла от -5° до +45°, простая и удобная для врача регулировка

Подлокотники

Удобные эргономичные подлокотники приятного дизайна

Сиденье

Самая низкая позиция для посадки пациента, оптимальная высота подъёма

Опора для ног

Двигается синхронно с подлокотниками и спинкой кресла

ATMOS® Chair E 2 и ATMOS® Chair M 2



Подголовник

Устойчивый подголовник с простой регулировкой высоты

Спинка

Плавно откидывается от 7° вперёд до горизонтального положения назад

Подлокотники

Откидываются по отдельности, а также синхронно соединены с подставкой для ног










Сиденье

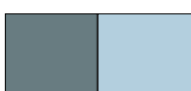
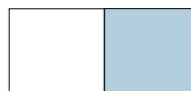
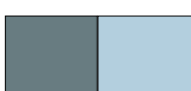
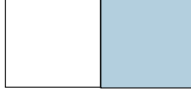
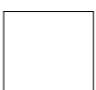








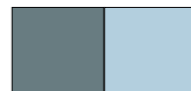
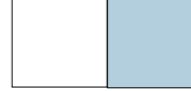
Сиденье кресла плавно поворачивается отдельно от основания кресла на 90° влево и вправо

Опора для ног

Двигается синхронно с подлокотниками и спинкой кресла

Данные для заказа

Кресло пациента ATMOS® Chair M 2		Артикул
1	ATMOS® Chair M 2	537.0000.0
Кресло пациента ATMOS® Chair E 2		Артикул
2	ATMOS® Chair E 2	535.0000.0
Выбор цвета		Артикул
	Белый 	535.2500.0
	Синий 	535.2100.0
	Сапфино-голубой 	535.2200.0
	Серый 	535.2300.0
	Бирюзово-голубой 	535.2400.0
	Чёрный 	535.2600.0
	Цвета за доплату: бежевый  , сизо-голубой  , бордо 	537.2000.0
Опции		Артикул
	Электромоторное изменение угла наклона спинки кресла ATMOS Chair E 2	535.1000.0
	Мобильность к креслу ATMOS Chair E 2	535.1100.0
	Станина с покрытием из нержавеющей стали	535.1200.0
4	Детское сиденье	503.0342.0

Кресло пациента ATMOS® Chair 31 P		Артикул
	ATMOS® Chair 31 P, цвет: Серый (основной) - сизоголубой (вставки) 	503.0800.0
	ATMOS® Chair 31 P, цвет: Белый (основной) - сизоголубой (вставки) 	503.0802.0
Кресло пациента ATMOS® Chair 21 P		Артикул
5	ATMOS® Chair 21 P, цвет: Серый (основной) - сизоголубой (вставки) 	503.0700.0
6	ATMOS® Chair 21 P, цвет: Белый (основной) - сизоголубой (вставки) 	503.0730.0
Опции		Артикул
	Ножная подставка, фиксированная, для кресла АТМОС 21 Р, из металлической трубы серебристого цвета и твердой резины	503.0731.0
	Сиденье для детей	503.0372.0
Кресло врача ATMOS® Chair 51 D		Артикул
Выбор цвета		Артикул
	Белый 	503.0465.0
3	Синий 	503.0461.0
	Сапфино-голубой 	503.0462.0
	Серый 	503.0464.0
	Бирюзово-голубой 	503.0465.0
	Чёрный 	503.0466.0
	Цвета за доплату: бежевый  , сизо-голубой  , бордо 	503.0460.0
Кресло врача ATMOS® Chair 21 D		Артикул
7	ATMOS® Chair 21 D цвет: Серый (основной) - сизоголубой (вставки) 	503.0750.0
	ATMOS® Chair 21 D цвет: Белый (основной) - сизоголубой (вставки) 	503.0740.0



1 ATMOS® Chair M 2



2 ATMOS® Chair E 2



3 ATMOS® 51 D



5 ATMOS® Chair 31 P



6 ATMOS® Chair 21 P



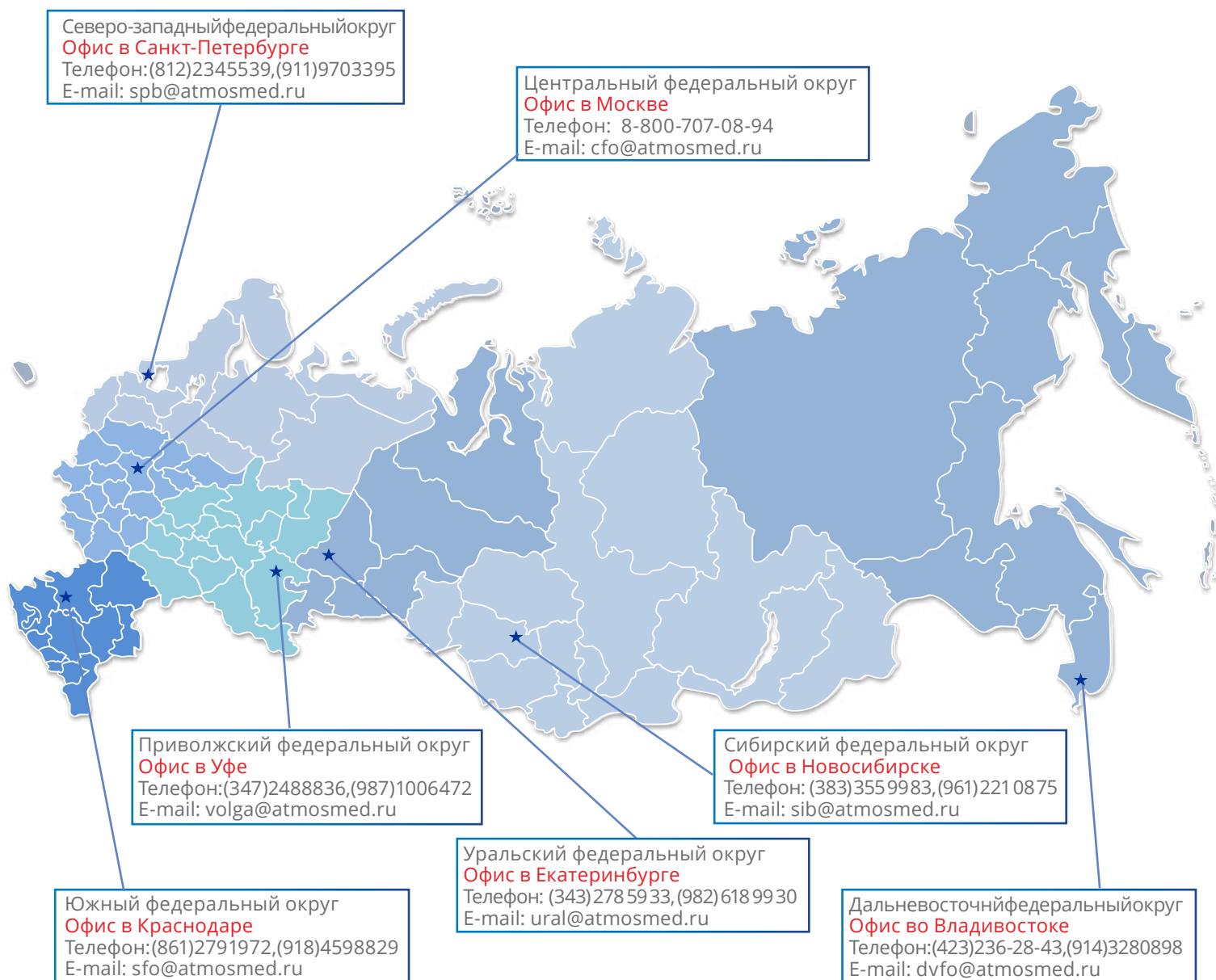
7 ATMOS® Chair 21 D



4 Съёмное сиденье для детей для кресел ATMOS® Chair E 2 / M 2

Врачи и пациенты во всём мире полагаются на АТМОС!

Мы рядом и всегда готовы прийти на помощь! Наши территориальные подразделения в городах:



Представительство ATMOS Medizin Technik (Германия) в России

ООО "АТМОС Медикаль"

105005, Москва, Посланников переулок, д. 5, стр. 8

Телефон: 8-800-707-08-94

atmosmed@atmosmed.ru



Инновационное медицинское оборудование:

ЛОР
Гинекология
Хирургия

Монтаж, гарантийное, сервисное
обслуживание, постгарантийный ремонт

www.atmos-med.ru